



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt használja a készüléket. Kérjük, a használati utasítást őrizze meg későbbi használatra, tegye más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsa be az előírásokat.

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A vénamasszírozó egy légpárnás masszírozó készülék a láb keringési elégtelenségeire, visszerekre, ödémára. A pulzáló nyomás felpezsdíti a vérkeringést, csökkentheti a nehézláb érzést, a duzzanatokat.

A masszázs segítheti a nyirokkeringést, a méreganyagok távozását a szervezetből.

Termékjellemzők

- a teljes láb (lábfej, lábszár és comb) kezelésére
- a lábszár és comb mandzsetták külön is használhatók
- 9 kezelési mód
- könnyen kezelhető vezérlő egység LCD kijelzővel
- méretre igazítható tépőzáras mandzsetták
- hálózatról és elemmel is működtethető

A doboz tartalma

- 1 db kezelő egység
- 1 pár lábszár mandzsetta
- 1 pár comb mandzsetta
- 1 db levegő vezeték
- 1 db hálózati adapter: 6V 300 mA
- 1 db használati útmutató



Biztonsági figyelmeztetés

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi biztonsági előírásokat:

1. Tartsa a terméket távol víztől, még akkor is, ha ki van húzva a hálózathoz!
2. Mindig azonnal kapcsolja ki a terméket közvetlenül használat után!
3. Ne tárolja olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet.
4. Soha ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül, hogy elkerülje az esetleges égési sérüléseket, áramütést vagy egyéb baleseteket.
5. Amennyiben gyermek vagy nem beszámítható személy használja a készüléket, mindig felnőtt felügyelete szükséges.
6. Soha ne hagyja a terméket egyedül gyermekkel.
7. Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott kiegészítőket, mindenben kövesse a használati útmutatót.

8. Ne használja a készüléket sérült lábon.
9. Ügyeljen rá, hogy semmilyen módon ne nehezedjen rá a mandzsettákra használat közben, illetve hogy a levegő vezetékek ne legyenek megtörve, megtekeredve.
10. Ne tegye ki a készüléket sugárzó hőnek.

Soha ne használja a terméket,

1. fürdés közben,
2. mozgás közben
3. amennyiben kábel vagy a hálózati csatlakozó sérült, nem működik megfelelően, vagy a termék valamely része eltört, vagy vízbe esett,
4. amennyiben nincs éber állapotban.

A termék a gyógykezelést nem helyettesíti. Amennyiben Ön gyógykezelés alatt áll, kérjük, mindenképpen konzultáljon orvosával a termék használata előtt.

Különösen ajánlott kezelőorvos tanácsát kikérni közelmúltban történt lábműtét, gyulladt láb, trombózis, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegség, pacemaker, artériás betegségek, tüdő ödéma, magas vérnyomás, rosszindulatú daganat, illetve várandósság esetén.

Purulens gyulladás, akut szeptikémia illetve krónikus hipertermiában szenvedő betegeknek a termék használata tilos.

**Akut cardiovascularis és cerebrovascularis betegségben szenvedő betegeknek tilos használni a készüléket. Lábon vagy talpon lévő bőrbetegségben szenvedők nem használhatják a terméket
A készülék csak lábon használható.**

Beüzemelés

A vénamasszírozót használhatja elemmel vagy hálózatról is.

A. Elemmel történő használat

Amennyiben elemmel szeretné használni, tegyen 4 db AA típusú 1,5 V-os elemet a kezelőegység hátoldalán lévő elemtartó rekeszbe a pólus jelzések figyelembevételével. Mindig egyszerre cserélje valamennyi elemet. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemeket.


B. Hálózatról való működtetés

Hálózatról történő használat esetén csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a kezelőegységhez, illetve az elektromos hálózathoz. Ügyeljen rá, hogy hálózatról való használat esetén ne legyen elem a kezelőegységben. Kérjük, ne használja a készüléket hosszabbítóval.

A vénamasszírozó működése

A kezelőegység segítségével a készülék levegőt pumpál a mandzsettákba, melyek ezáltal masszírozzák a lábat. A pumpálás ismétlésszáma és időtartama módozatonként változik. Kérjük, kezdje a masszírozást a legalacsonyabb fokozattal, majd állítsa a készüléket komfortérzete szerint.

1. Helyezkedjen kényelmes testhelyzetbe: a készüléket használhatja ülve vagy fekvé is, de mindenképpen tartsa lábait lazán, enyhén behajlítva.
2. Helyezze fel a mandzsettákat a lábszárára és a combjára és rögzítse azokat a tépőzárakkal. Figyeljen rá, hogy a mandzsetták ne legyenek túl szorosak, inkább lazán simuljanak a lábra úgy, hogy a körülbelül a kézfejét még be tudja csúsztatni a mandzsetták alá.
3. Csatlakoztassa a levegő vezetéket a mandzsettákhoz és a kezelő egységhez. Figyeljen rá, hogy a vezetékek szorosan csatlakozzanak.
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az elektromos hálózathoz (amennyiben hálózatról szeretné működtetni.)
5. Nyomja meg a kezelőegységen a "POWER" be- és kikapcsoló gombot a bekapcsoláshoz. Ekkor LED fény jelzi a bekapcsolt állapotot. A gomb újbóli megnyomásával a készüléket ki tudja kapcsolni, a lámpa ekkor kialszik.
6. Az "UP" and "DOWN" gombok illetve a kijelző segítségével állítsa be a kívánt programot. 9 előre beprogramozott mód közül választhat. Az alábbi táblázat mutatja a mandzsetták felpumpálásának és leeresztésének időtartamát az egyes módozatokban. Minden mód egy készenléti felpumpálással kezdődik, amely 54 másodpercig tart. Ez arra szolgál, hogy a mandzsetták megteljenek levegővel, és készen álljanak a masszírozó pumpálás elvégzésére, emiatt ebben a fázisban még intenzív masszírozó hatást nem lehet érzékelni. Ezt követően a készülék a választott program szerinti időtartamig pumpálja a mandzsettákat ismétlődően a program végéig. (Például az egyes program választása esetén a kezdeti 54 másodperces készenléti felpumpálás után 27 másodperces felpumpálások ismétlődnek és 4 másodperces leeresztések, a második módban 36 másodperces felpumpálások és 5 másodperces leeresztések és így tovább.)

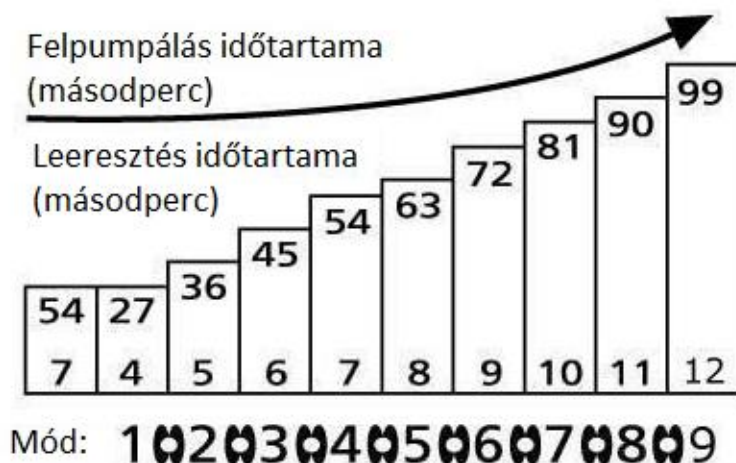

7. A kezelés alatt végig követheti a kijelzőn az eltelt időt. A kezelés 20 percig tart, mely után a felpumpálások befejeződnek és a mandzsetták leeresztenek. Ezt követően a „POWER” be- és kikapcsoló gomb benyomásával tudja teljesen kikapcsolni a készüléket.
8. Amennyiben a kezelés ideje alatt szeretne módot váltani, akkor a számlálás újból előről indul.
9. Amennyiben a program letelte előtt szeretné befejezni a kezelést, nyomja meg a “POWER” be- és kikapcsoló gombot, ekkor a készülék kikapcsol, és a mandzsetták leengednek.
10. A mandzsettákat külön-külön is használhatja. Ebben az esetben a levegő vezetékeket úgy kell csatlakoztatnia, hogy ne maradjon nyitott végű cső, mert különben a készülék nem tudja a pumpálást véghezvinni.

Példák a mandzsetták külön használatára:



Karbantartás, tisztítás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról. A mandzsettákat tisztítsa enyhén nedves, puha ruhával. Ne tegye őket mosógépbe vagy szárítógépbe és ne használjon tisztítószereket. Mielőtt újra használná a készüléket, hagyja a mandzsettákat teljesen megszáradni.

Tárolás

Használaton kívül tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen, lehetőség szerint saját dobozában. Ellenőrizze, hogy az elem ne maradjon a kezelő egységben, amennyiben hosszán ideig nem használja a készüléket. Ügyeljen rá, hogy az elcsomagolásnál ne törje meg a levegő vezetéket.



Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem-, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi

hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz!

Műszaki adatok:

Termékkód	GYVTVM
Bemeneti feszültség	100V-240V - 50-60 Hz 0,1 A
Adapter kimeneti feszültség	6 V – 300 mA
Elem	4 db 1,5 V (AA)
Mandzsetta körméret	Lábszár mandzsetta lábfejnél: 26-32 cm
	Lábszár mandzsetta lábszárnál: 36-54 cm
	Comb mandzsetta: 34-64 cm

Származási hely: Kína

A www.vivamax.hu weboldalon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint üzletkeresőnket is. Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket szintén megtalál a www.vivamax.hu weboldalon:

- **Vivamax masszázslécek** –hátmasszázs az otthonában bármikor
- **Vivamax kézimasszírozók** - teljes teste átmasszírozásához
- **Vivamax masszázsszővek** - a megfelelő alak elérése érdekében



Otthon az egészségben!

Magyarországi forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Tel: +36 1 /889 90 80

Fax: +36 1/889 90 95

www.vivamax.hu

info@vivaldi.hu

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás¹ neve és címe: _____

Termék megnevezése: _____

Termék típusa: _____

Termék gyártási száma (amennyiben van): _____

Importőr neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vivaldi Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Vásárlás időpontja: _____

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi)
az üzembe helyezés* időpontja:

_____ (*a megfelelő aláhúzendő)

Jótállási határidő: A vásárlás, illetve üzembe helyezés időpontjától számított 12 hónap.

Fontos tudnivalók:

1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
2. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
3. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhet a feltüntetett javító szerviz.
4. A jótállási jegyen történő bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
5. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli.

Jótállási határidő:

1. A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napján kezdődik.
2. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használta.

¹ A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

3. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A vásárló jótálláson és a szavatosságon alapuló jogait az alábbi törvények szabályozzák:

1. A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a 151/2003 évi kormányrendeletben illetve a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben szereplő jogok illetik meg.
2. A termék meghibásodása esetén díjmentes kijavítás vagy megfelelő árleszállítás kérhető.
3. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül – cserekészülék biztosítása esetén 30 nap - elvégezze. A javítást a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig, rendeltetésszerűen használt, hibátlan termékhez képest nem csökken.
4. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Termék kicserélését kérheti a vevő:

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés *a*) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótálláson alapuló igény bejelentése:

A vásárló az igény érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a vásárlás helyén, vagy a javítószolgáltatónak kell bejelentenie.

A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:

Vita esetén a felek kérhetnek egy független minőségvizsgáló szervtől szakvéleményt, mely a kérelmező részére térítés köteles.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Jótállási felelősség megszűnése:

1. A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba a rendellenes használat, átalakítás, idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
2. Amennyiben a készüléket megbontották vagy a készülékben idegen javítás történt, a készülék vonatkozásában a jótállási kötelezettség megszűnik.
3. A rendellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutató melléklünk, s kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibáért nem vállalunk felelősséget.

A kereskedő és javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát feltüntetni.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a

javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét

Szerviz

Márkus János 1118 Budapest, Villányi út 84. Tel:06/30/946-0388 E-mail:
markus.szerviz@gmail.com

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja: _____

Hiba oka: _____

Kijavítás módja: _____

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _____

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja: _____

Hiba oka: _____

Kijavítás módja: _____

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _____

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja: _____

Hiba oka: _____

Kijavítás módja: _____

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _____

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja: _____

Hiba oka: _____

Kijavítás módja: _____

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _____